



QUEM TEM
SAÚDE É
MAIS FELIZ.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Código:
TI – 074/2021

Data Emissão:
20/08/2021

Próxima Revisão
16/02/2022

Versão nº
1.0

Páginas:
6

EXCLUINDO UMA IMAGEM NO MEDIWORKS

1. DEFINIÇÃO

Explicar como excluir uma imagem de raio x no MediWorks.

2. OBJETIVOS

Definir padrões para excluir imagem de raio x no MediWorks.

3. INDICAÇÃO

Quando o técnico do raio x deseja remover alguma imagem errada.

4. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO


Técnicos.

5. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:

Nenhum.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS


6.1 Abra a *Conexão de Área de Trabalho Remota* e acesse o servidor de raio x;

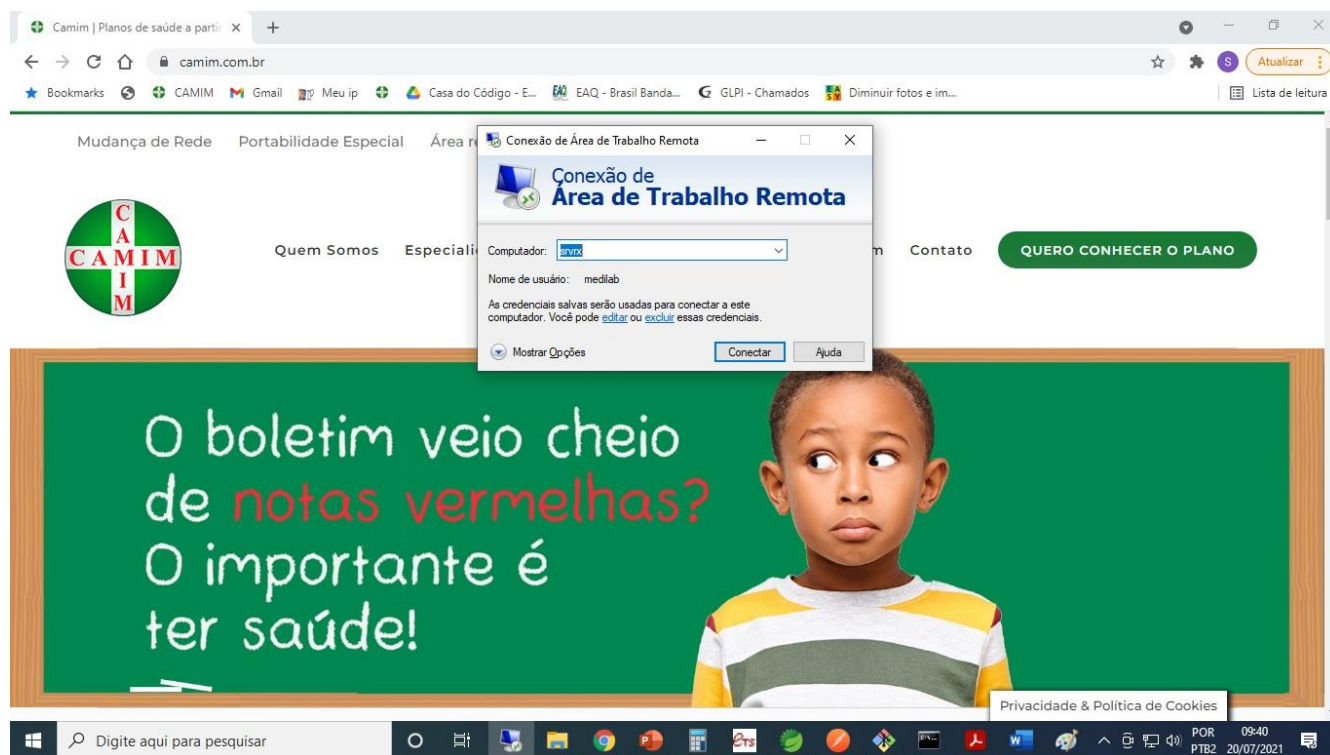


6.2 Abra o software MediWorks 9 e entre com o usuário e senha;




6.3 Nos botões de pesquisa selecione *Número*, digite o número do talão sem a letra. Em *Período*, selecione o período que foi feita a imagem ou selecione *Todas as datas* e clique em *Procurar*;

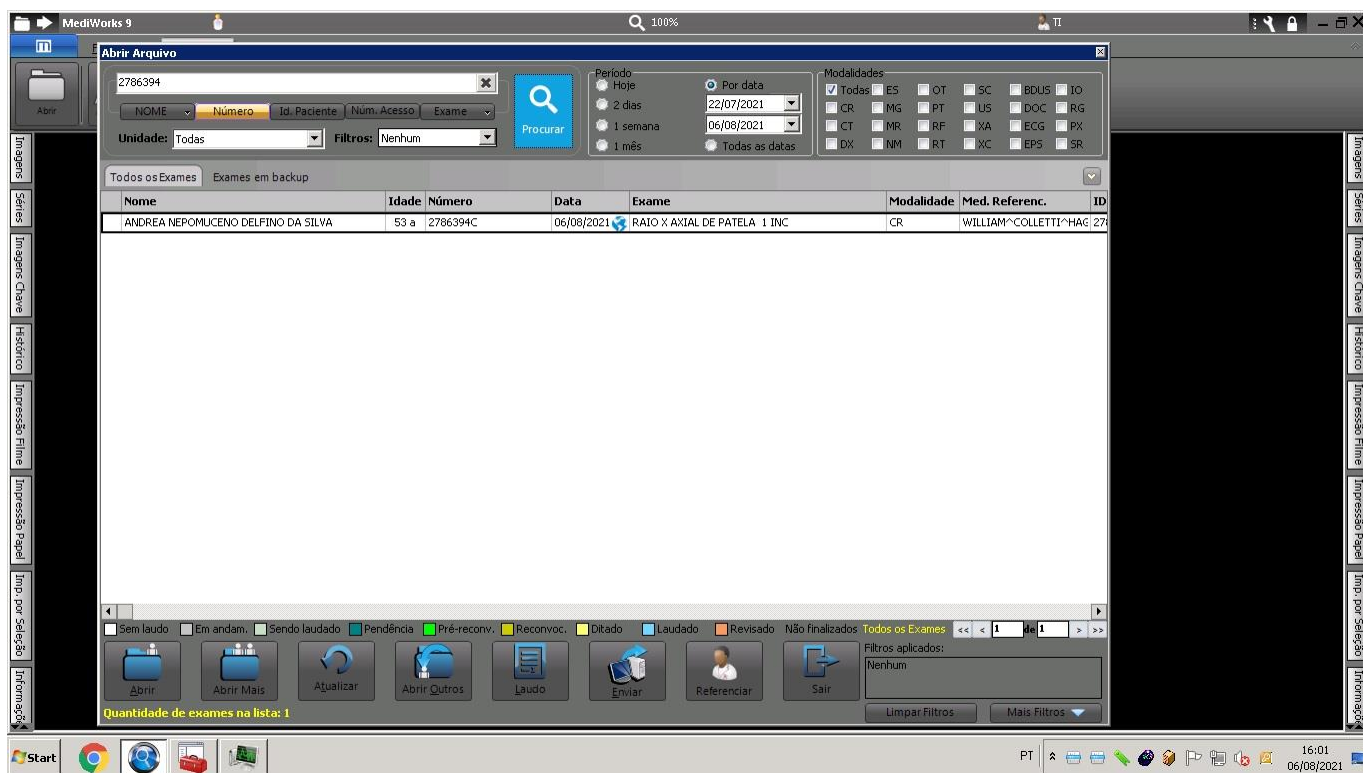


6.4 Dê dois cliques no nome do paciente e clique em *Sim* na caixa de confirmação;

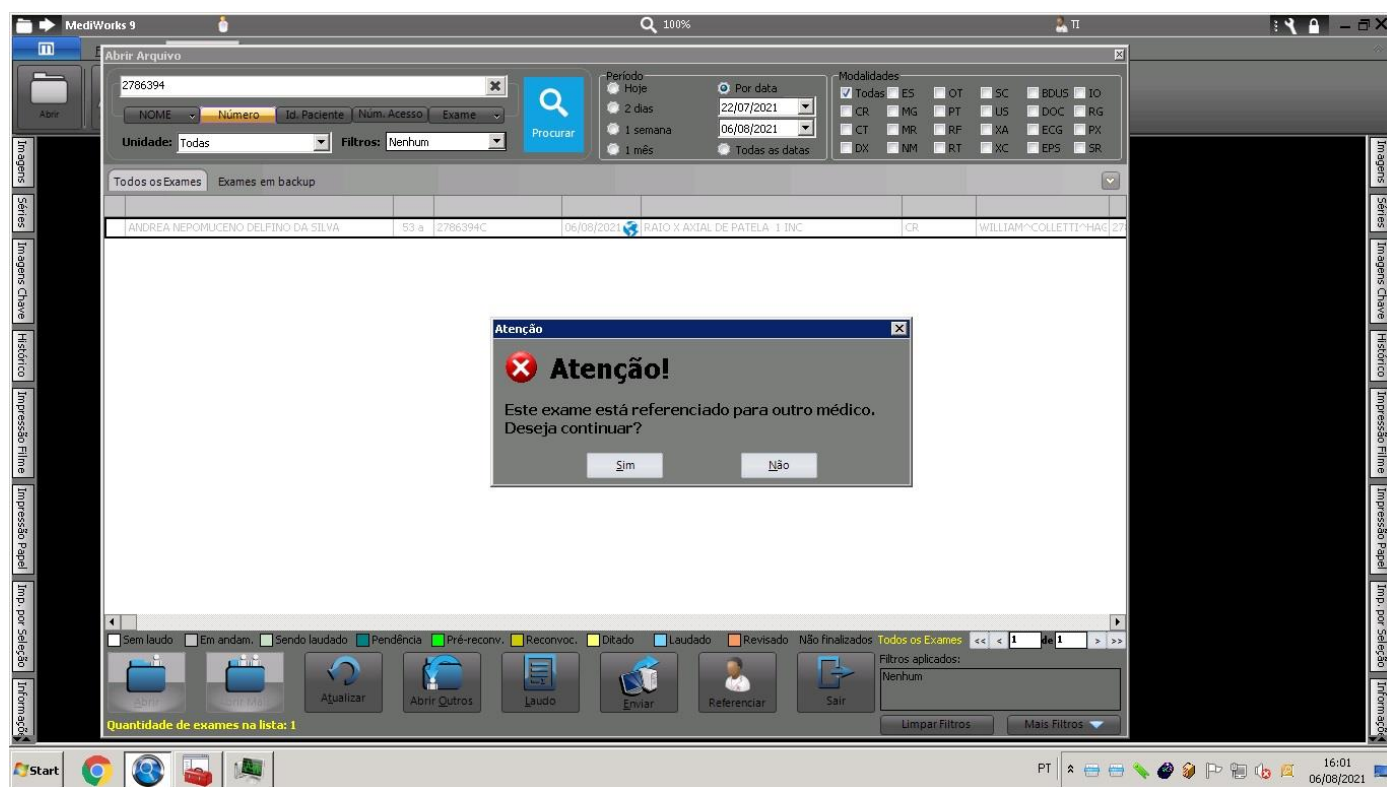

6.5 Na lateral esquerda clique em *Imagens* e selecione a imagem que deseja remover;

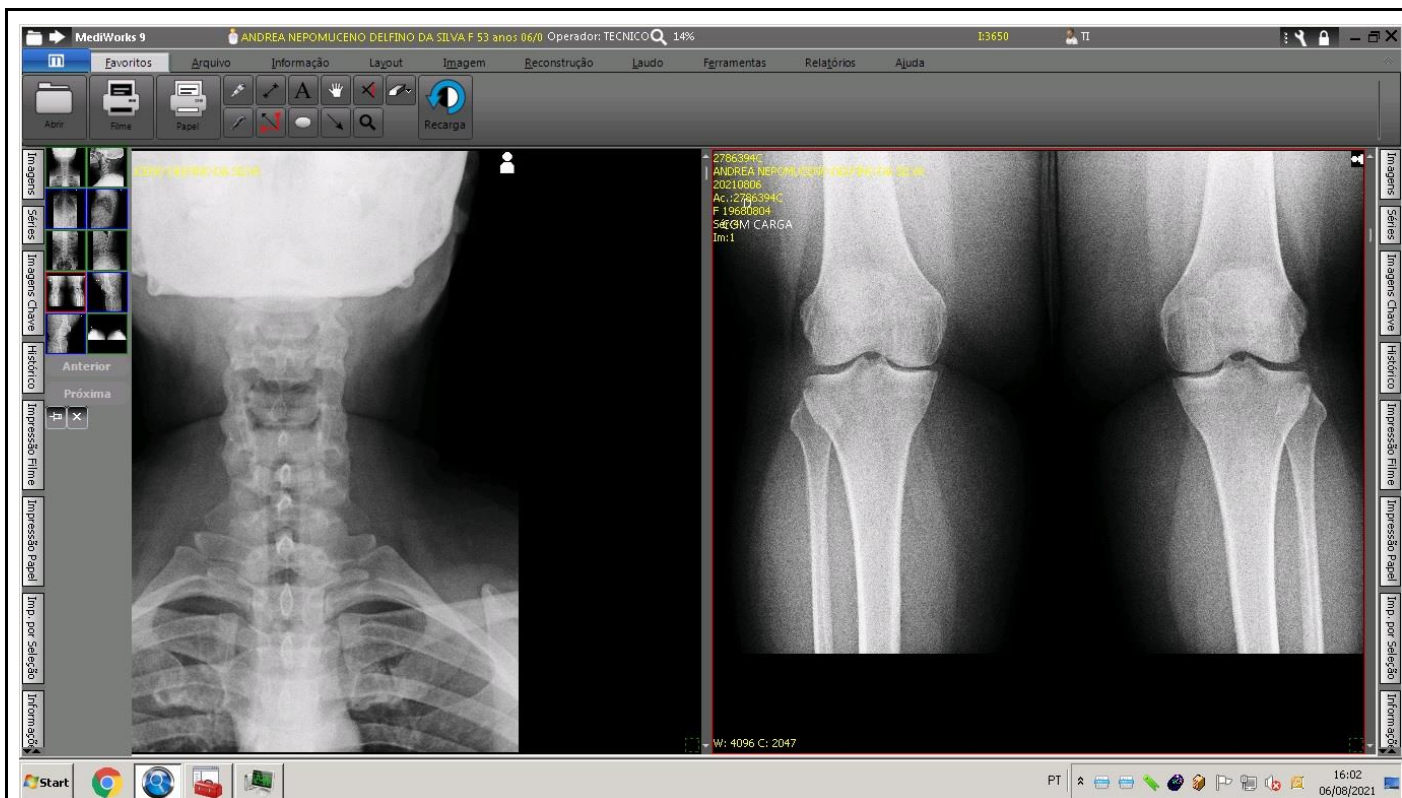

6.6 No canto superior esquerdo clique no logo da MediWorks em azul e clique em *Excluir Imagem*;

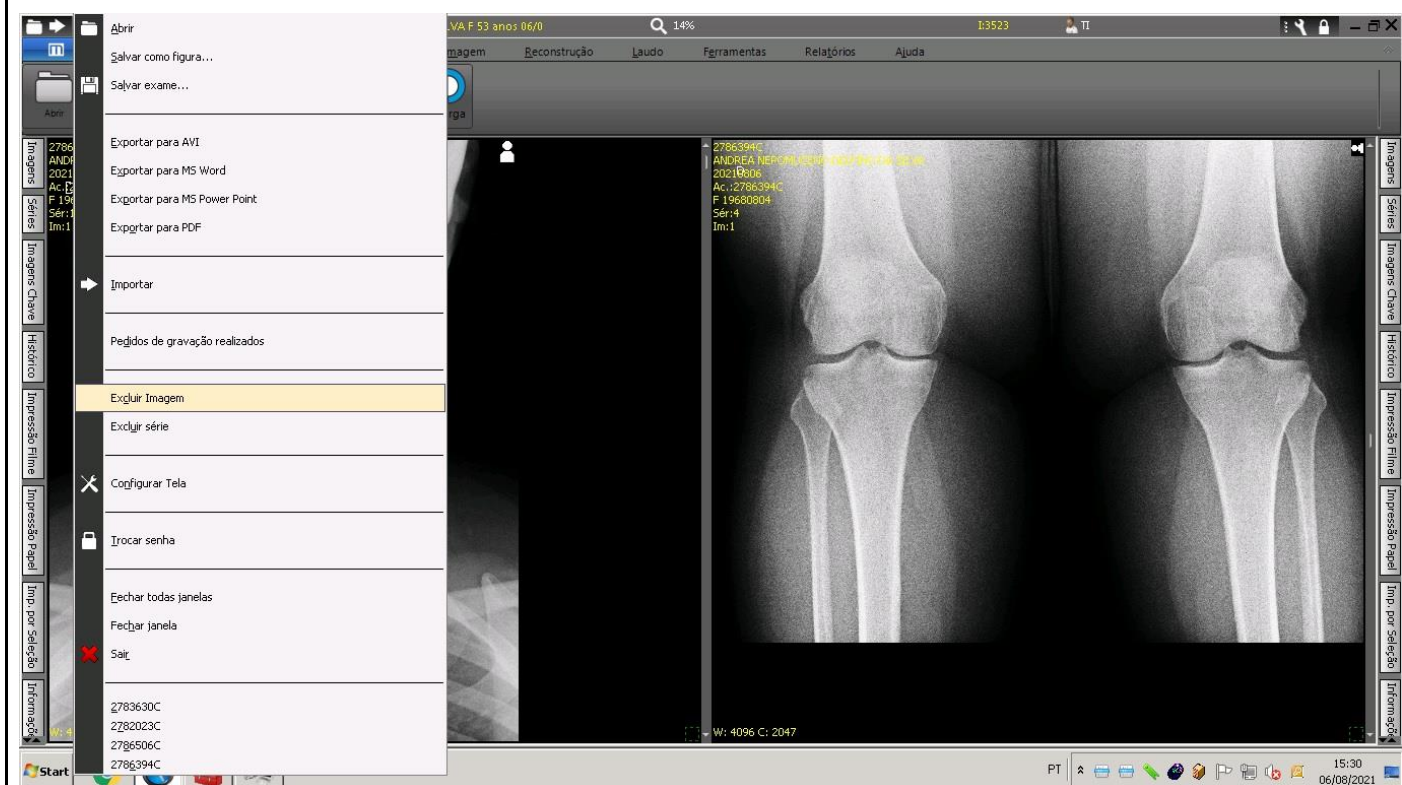

6.7 Na caixa de confirmação clique em *Sim*.



7 ATENÇÃO A PONTOS IMPORTANTES

Não se aplica.

8 RESULTADOS ESPERADO

Remover alguma imagem errada de raio x do paciente.

9. REFERÊNCIAS:

Não se aplica.

Elaborado por:

Fabio Nascimento

Revisado por:

Ana Carolina

Aprovado por:

Gabriel Azevedo